

Dispositions de sécurité générales

- ▶ Lire attentivement les présentes instructions de service avant utilisation.
- ▶ Conserver les présentes instructions de service à portée de main pour tous les utilisateurs.
- ▶ Un non-respect des instructions de service rend caduque les conditions de garantie pour le produit et peut avoir pour conséquence des blessures et des dommages matériels graves.
- ▶ Seul un personnel compétent qualifié est habilité à utiliser l'appareil.

Consignes de sécurité avant l'utilisation

- ▶ Respecter les indications du fabricant et les consignes de sécurité du milieu à contrôler.
- ▶ Lors du prélèvement de matières dangereuses, respecter les règles techniques pour les substances dangereuses (selon TRGS) et porter un équipement de protection approprié.
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans le cadre de la résistance du matériau et conformément à la destination. Tout autre type d'utilisation affecte la garantie légale/commerciale.
- ▶ N'employez pas la manière forte pendant la commande de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT!

Atteinte des voies respiratoires et d'autres organes par des vapeurs ou des liquides qui s'échappent.

- ▶ Lors du prélèvement de matières dangereuses, respecter la fiche de données de sécurité du milieu à échantillonner.
- ▶ Porter un équipement de protection approprié.

REMARQUE!

Avant l'utilisation, l'appareil doit être nettoyé selon la conformité de votre processus de nettoyage validé.

- ▶ Des mesures de nettoyage manuel doivent être effectuées dans la zone de nettoyage/désinfection et en respectant les consignes de sécurité du travail.
- ▶ Respecter les résistances chimiques.

Consignes de sécurité pendant et après utilisation

- ▶ L'appareil peut être utilisé dans une plage de température variant entre 0 et 60 °C.
- ▶ Ne pas faire des mouvements de levier pendant l'utilisation. L'appareil peut-être déformé.
- ▶ La zone de prélèvement d'échantillons doit être

exempte de sources de perturbation et de danger (par exemple, pièces en rotation).

Structure et fonction

- ▶ L'appareil est en acier inoxydable 1.4404 (AISI 316 L) / 1.4571 (AISI 316 Ti).
- ▶ L'appareil est approprié pour le prélèvement de liquides et de milieux à faible viscosité sans composants solides.
- ▶ L'appareil est seulement approprié pour le prélèvement et n'est pas approprié pour une utilisation en continu.
- ▶ L'appareil n'est pas approprié pour le stockage d'échantillons.
- ▶ L'appareil ne requiert aucun entretien et est approprié pour la stérilisation à la vapeur (jusqu'à 121 °C).

Pièces en contact avec le milieu

- ▶ Acier inoxydable 1.4404 (AISI 316 L) / 1.4571 (AISI 316 Ti)

Signaler immédiatement au transporteur/livreur les dommages de l'emballage.


Prélèvement d'échantillons sûr

⚠ AVERTISSEMENT!

Blessure corporelle par des liquides qui s'écoulent de manière incontrôlée.

- ▶ Vérifier l'ajustement serré et les dommages de toutes les pièces avant l'utilisation.
- ▶ Ne pas verser l'appareil rempli.
- ▶ Porter un équipement de protection approprié.

1. Immerger l'appareil jusqu'à la profondeur souhaitée dans le milieu à échantillonner.
2. L'appareil est rempli avec le liquide à échantillonner.
3. Sortir l'appareil du milieu à échantillonner.
4. Ouvrir la vanne ① à l'aide de l'ouverture du pouce ② et vider l'échantillon dans un récipient approprié.

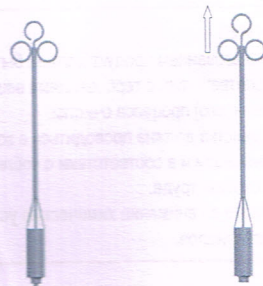

5. Nettoyer l'appareil.